

# Nadstandardní funkce pro dokonalý efekt čištění zubů

## 5 RYCHLOSTÍ

### Zvolte si vlastní rychlost\*\*

Vyberte si rychlost, která vám umožní snadný přechod na novou sonickou technologii i v případě problémů s dásněmi.



### Čistěte si zuby 3 minuty 2x denně

Všechny dobíjecí Sonic style kartáčky mají časovač nastavený na 3 minuty. Po jejich uplynutí se kartáček automaticky zastaví.

Funkce 30 vteřinového časovače\*\*: každých 30 vteřin se zastaví oscilace kartáčku na necelou 1 vteřinu, aby jste byli upozorněni na systematické čištění zubů.

### Můžete si vybrat. Zvolte si vhodný kartáček dle vašich potřeb.

#### a) Hlavice „Triple Cleaning“ – s 3D efektem

Pro efektivní odstranění plaku trojitým čištěním pomocí tří druhů vláken.

#### b) Hlavice „Super-Fine Soft“ – jemná

Pro velmi jemné a šetrné čištění u citlivých zubů.

#### c) Hlavice „Point Brush“ – jednosvazková

Pro bodové čištění rovinátek nebo mezer mezi nesouměrnými zuby.

Doporučujeme výměnu hlavice kartáčku minimálně každé tři měsíce nebo dle opotřebení.

\* Funkce je k dispozici u řady OMRON Sonic style 456 a 458.

\*\* Funkce je k dispozici u řady OMRON Sonic style 458.

## Srovnávací tabulka



Název/ číslo modelu	HT-B458-S	HT-B458-R	HT-B456	HT-B450	HT-B201
Barva	●	●	●	●	●
Štíhlý design a nízká hmotnost	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice se 3 druhy vláken „Triple Cleaning“	✓	✓	✓	✓	✓
Balení včetně čistící hlavice s velmi jemnými vlákny „Super-Fine Soft“	✓	✓	✓		
Automatické vypnutí po 3 minutách	✓	✓	✓	✓	
3 různé čistící režimy	✓	✓	✓		
30 vteřinový časovač	✓	✓			
5 rychlostí	✓	✓			
Standardní kmit	~25.500	~25.500	~25.500	~25.500	~20.000
Široký kmit	~13.000	~13.000	~13.000		
Bodový kmit	~33.000	~33.000	~33.000		
Typ baterie	2x Ni-MH 2,4 V – indukční nabíjení				1x AA alkalická baterie

CE



Měřiče krevního tlaku • Teploměry • Inhalátory  
• Monitory tělesné stavby těla • Elektrické neurostimulátory • Krokoměry

### Zakoupíte ve specializovaných prodejnách.

Pouze zde vám zaškolení odborníci pomohou s výběrem pro vás vhodného přístroje.

Obchodní zastoupení pro ČR CELIMED s.r.o.  
Spotřebitelská linka: 417 639 530  
Více na [www.kartacky-omron.cz](http://www.kartacky-omron.cz)



# OMRON



## Sonic style™

Japonské sonické zubní kartáčky

## Jak si správně čistit zuby



Vnímejte své zdraví

## Jak si správně čistit zuby kartáčkem Sonic style™


### Účinné odstraňování zubního plaku

Všechny zubní kartáčky OMRON Sonic style pracují na principu sonické technologie. Sonické oscilace velmi účinně odstraňují zubní plak. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když se systematicky budete jemně dotýkat zubů a dásní přední částí kartáčku.



#### Vyčistěte přední část zubů a kousací plochu

Pomalou pohybujte kartáčkem po jednotlivých zubech v úhlu 90°, tedy kolmo na čistěnou plochu.

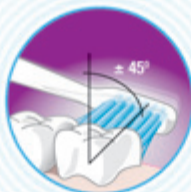

#### Čistěte prostor mezi zuby a dásněmi

Pohybujte kartáčkem pomalu v úhlu 0 až 45° na obě strany zubů. Příliš netlačte, dotýkejte se pouze konečky vláken.



#### Nezapomeňte na vnitřní stranu zubů

Nápověda: nejlepšího výsledku dosáhnete pomocí použití bodového kmitu. Kartáček držte vertikálně.



#### Vyčistěte kartáček

Důkladně vyčistěte hlavici kartáčku pod tekoucí vodou.

## Unikátní čistící režim – bodový a široký kmit



#### Zvolte si čistící režim\*

Můžete si zvolit čistící režim dle vaší osobní potřeby. Oranžová kontrolka signalizuje kmit se širokým záběrem a modrá bodový kmit.

#### Režim širokého kmitu

Dvakrát široký kmit pro jemné čištění pro prostor mezi zuby a dásněmi.



#### Režim bodového kmitu

Vlákna kartáčku se pohybují 1,5x hlouběji proti ostatním režimům. Zvláště vhodný pro efektivní čištění zadních zubů a vnitřní strany předních zubů.

