


Příklady léčby na různých částech těla ⁵

RAMENA


Ztuhlost ramen je pravděpodobně způsobena překrvením tkáně trapézového svalu, který pohybuje rameny, stlačením nervů z důvodu únavy nebo nedostatečnou krevní cirkulací v podkožních tkáních – jako jsou např. svaly. Přiložte elektrody symetricky na oblast ztuhlých ramen tak, aby páteř byla uprostřed.

Potíže:

Ztuhlost, svalová bolest nebo bolest od nervu.

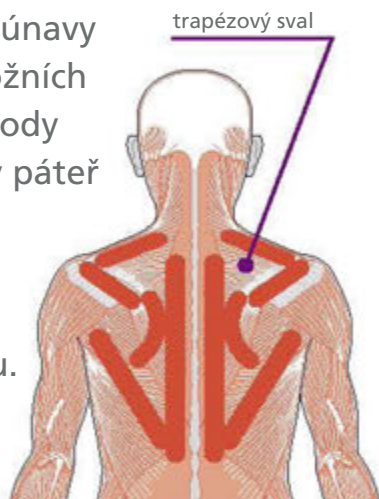

Příklady aplikace elektrod: ramena

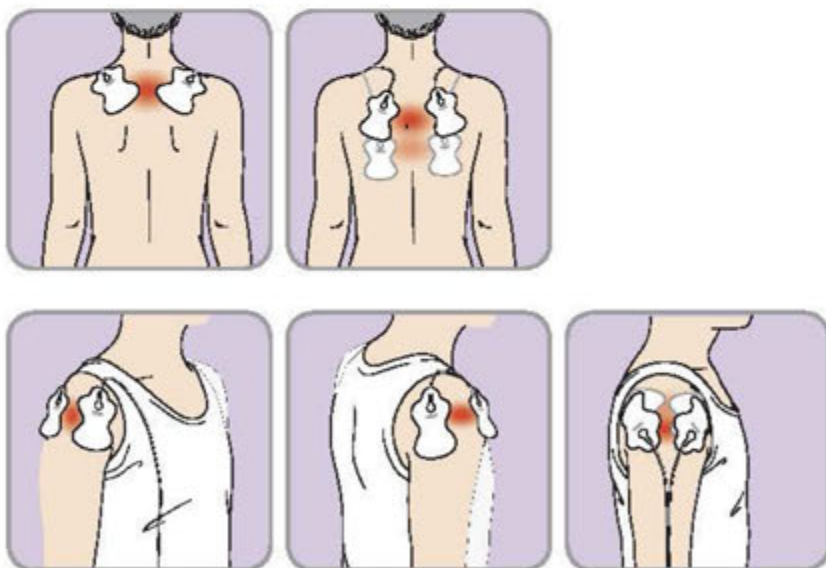


Nepoužívejte v blízkosti srdce, na hrudníku, a ani neumísťujte jednu elektrodu vpředu a jednu elektrodu zezadu na hrud, protože procházející elektrický impuls může způsobit poruchu srdečního rytmu, což může mít smrtelné následky.



PAS (KŘÍŽOVÁ OBLAST ZAD)

Příčiny bolesti zad jsou různé. Nízkofrekvenční terapii lze použít při bolestech způsobených ztuhlostí zad, bolestí svalů nebo neuralgií (bolest od nervu). Přiložte elektrody symetricky do oblasti, kde pociťujete bolest, páteř by měla být ve středu.

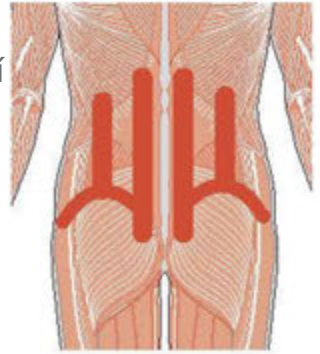


Potíže:

Ztuhlost, svalová bolest nebo bolest od nervu.

Příklady aplikace elektrod:

křížová oblast zad

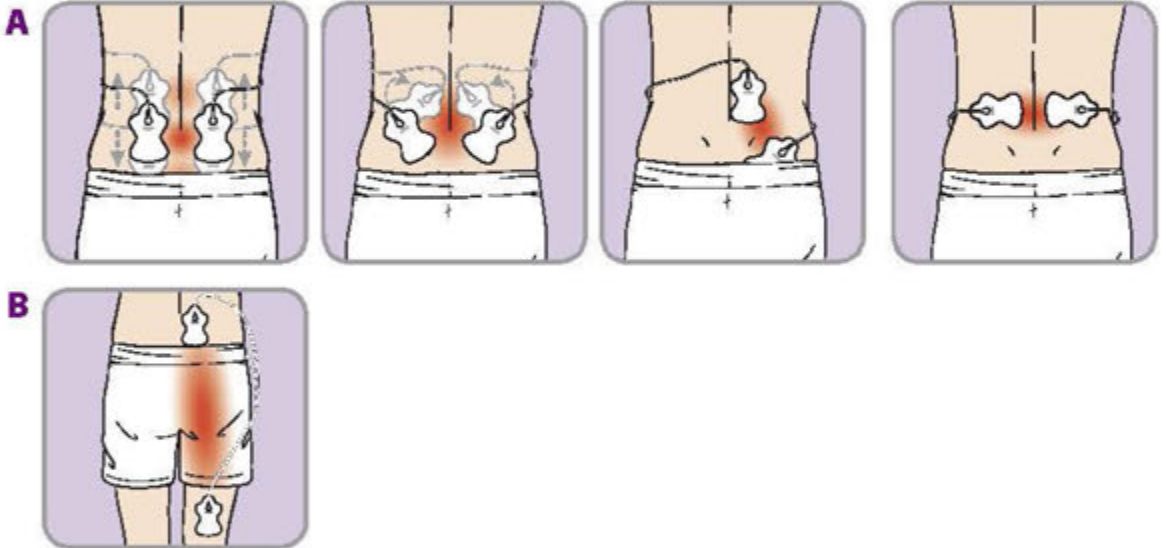


Klouby (koleno, loket)

Přiložte obě elektrody ze stran bolavého kloubu.

Potíže:

Otok, ztuhlost, bolest svalová nebo od nervu.

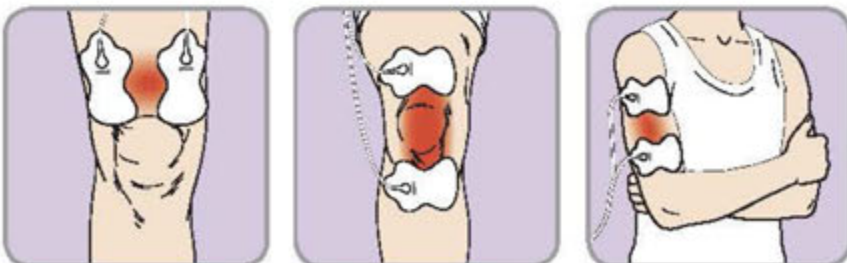


Příklady léčby na různých částech těla ⁵

LÝTKO

Otoky a únava lýtek může být způsobena překrvením tkáně v dané oblasti. Přiložte elektrody na horní a spodní část lýtka.

Potíže:

Otoky, únava, ztuhlost, bolest svalová nebo od nervu, pocit chladu, pocity bolesti.

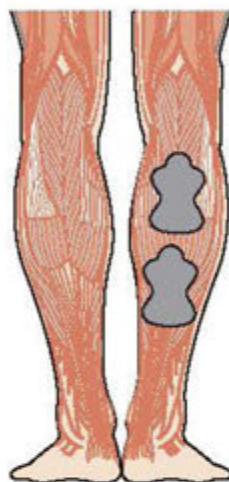

Příklady aplikace elektrod:

Lýtka



Bok a stehenní oblast



CHODIDLO

Pocit chladu v končetinách může být způsoben špatnou cirkulací krve. Příčinou otoku a únavy chodidel může být špatný zpětný oběh krve a lymfy. Přiložte jednu elektrodu na chodidlo a druhou elektrodu na lýtko.

Potíže:

Otok, únava, ztuhlost, svalová bolest nebo bolest od nervu, celkový pocit bolesti.



Příklady aplikace elektrod: chodidlo



Nepřikládejte obě elektrody současně na obě chodidla a ani nepřikládejte obě elektrody současně na obě lýtka.



PAŽE

Přiložte elektrody z každé strany bolavého místa na paži.

Potíže:

Otok, ztuhlost, bolest svalů nebo bolest nervového původu.

