

CELIMED

Datum výroby	
Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.	
Obvod paže	
Datum výroby je součástí sériového čísla. Které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.	




Popis symbolů	
Označení CE	
Značení UKCA	
Číslo šarže	
Jedinečný identifikátor prostředku	
Zdravotnický prostředek	
Omezení teploty	
Omezení vlhkosti	
Omezení atmosférického tlaku	
Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením	
Indikátor umístění manžety pro levou ruku	
Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu	
Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.	
Není vyrobeno z latexu	
Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.	
Referenční katalogové číslo	
Manžeta Easy Cuff	
Manžeta Intelli Wrap	
Komfortní manžeta	
Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko	

CELIMED

Výrobce	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunoisubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
Výrobní závod	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Pobočky	
Distribuce a servis pro ČR	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3467/5a, 400 11 Ústí nad Labem požární služba - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

Vyrobeno v Číně.
Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s příslušným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

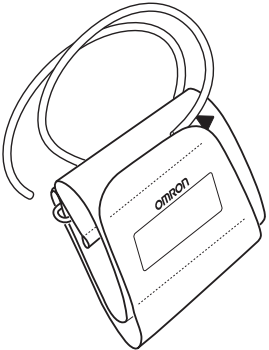

Prodloužená manžeta CW

Manžeta pro normální i silnou paži k měřicům krevního tlaku Omron

- Návod k obsluze

OMRON

All for Healthcare

IM-HEM-RML30-E-CZ-04-10/2022

Datum vydání: 2023-06-27

Veškeré závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zařízením, oznamte výrobci a příslušnému úřadu v členském státě, ve kterém sídlíte.




Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchová zástrčka
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) Vlhkost 10 až 95 % (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90% vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Rozměry manžety	Přibližně 563 mm x 151 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90% vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) Vlhkost 10 až 95 % (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchová zástrčka
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

Technické údaje:

Model	Manžeta měříče krevního tlaku OMRON
Obvod paže	Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)
Rozměry manžety	22 až 42 cm
Rozsah tlaku manžety	Přibližně 563 mm x 151 mm
Přesnost	Tlak: 0 až 299 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90% vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) Vlhkost 10 až 95 % (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchová zástrčka
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok



Údržba

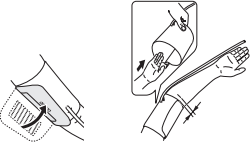

3. Počítejte, co je manžeta správně umístěna. PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

Měření na pravé paži


Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

• Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.

• Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

OMRON

Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)

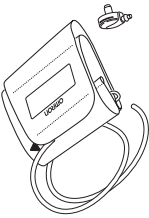

Děkujeme vám za zakoupení prodloužené manžety společnosti OMRON. Obvod paže pro tuto manžetu je 22 až 42 centimetrů. Prodloužená manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON. Viz originální návod Vašeho měřič krevního tlaku. Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné koncovky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.

Z bezpečnostních důvodů je nutno **pozorně dodržovat tento návod.**


Návod si ponechte pro budoucí použití. **Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne Váš OŠETŘUJÍCÍ LEKÁŘ.**

⚠ Upozornění


- S touto manžetou používejte pouze schválený monitor krevního tlaku.
- Manžetu neperte ani nenechávejte.

Návod k obsluze

1.

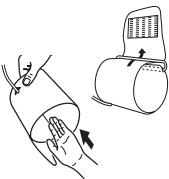

2.

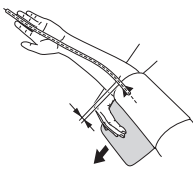

Poznámky:

- Nepoužívejte manžetu na hrubý oděv a nevyhnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte polštářek nebo jinou vhodnou podložku k podepření lokte.