

CELMED

	Referenční katalogové číslo
	Manžeta Easy Cuff
	Manžeta Intelli Wrap
	Komfortní manžeta
	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko
	Datum výroby
	Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.
	Obvod paže
Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.	

CELMED


Popis symbolů	
	Označení CE
	Značení UKCA
	Číslo šarže
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.
	Není vyrobeno z latexu
	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.

Veškeré závažné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto přístrojem, nahlašujte výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.



Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

OMRON

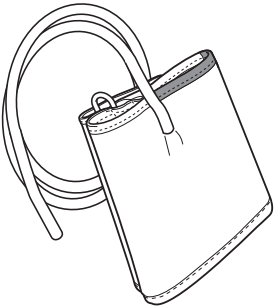

Manžeta CS2 (pediatrická)

Malá manžeta

• Návod k obsluze

CZ

	Výrobce OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunitsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
	Zastupce v EU OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian, 116600 Liaoning, Čínská lidová republika OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Millne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors	
Pobočky	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors
Distribuce a servis pro ČR 	CELMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 400 11 Ústí na Labem požární servis - tel.: +75 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

Vyrobeno v Číně

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

All for Healthcare

IMI-HEM-CS24-E-CZ-08-10/2022

Datum vydání: 2023-06-27

Technické údaje:	
Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	Malá manžeta CS2 (HEM-CS24)
Obvod paže	17 až 22 cm
Rozměry manžety	Přibližně 115 mm × 367 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I


CELIMED

Údržba

Pokyny

CELIMED

3. Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.
- Nepřikládejte manžetu přes silné oděvy a nevyhnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnajte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte k podepření lokte polštářek nebo jinou vhodnou podložku.
- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mydla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné tekavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovnou hadičku nadměrně neodvíjejte ani nemackejte.

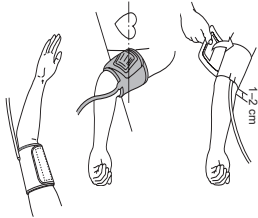


Měření na pravé paži

- Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.
- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
 - Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.
2. Dejte paži do správné polohy.
- 1) Vzduchová hadička by měla směřovat dolů podle vnitřní strany vašeho předloktí a měla by být součástí s vaším prostřednictvím.
 - 2) Spodní strana manžety by měla být asi 1 až 2 cm nad vašim loktem.
 - 3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vycentrována na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

OMRON

Manžeta CS2 (pediatrická) (HEM-CS24)

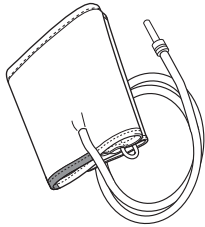


CELIMED

Děkujeme vám za zakoupení malé manžety společnosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro paži o obvodu 17 až 22 centimetrů. Viz originální návod vašeho měřice krevního tlaku. Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod. Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o vlastním krevním tlaku, **PORADTE SE S LÉKÁŘEM.**

⚠ Upozornění: Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezábráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Tato manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON.
- Tato manžeta funguje pouze s monitory krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-CS24, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si i prsím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástrčky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze

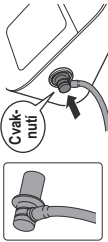


Zasuňte vzduchovou zástrčku pevně do vzduchového konektoru.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástrčku dle obrázku nalevo, zaveďte ji do vzduchového konektoru až do polohy, kde zapadne.

Nasazení manžety

1. Procháňte levou paži skrz smýčku manžety.

Poznámka: Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smýčka. Hladká látka musí být uvnitř smýčky manžety.

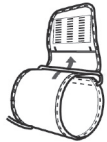

CELIMED